




MANUAL DE USUARIO DE VISUALIZACION

- **¿Como Ingresar?**

- * **Paso 1:** Para ingresar al servidor es necesario que usted ingrese esta dirección de IP en la barra de dirección. **Ejemplo:**



- * Aparecerá la siguiente pantalla:

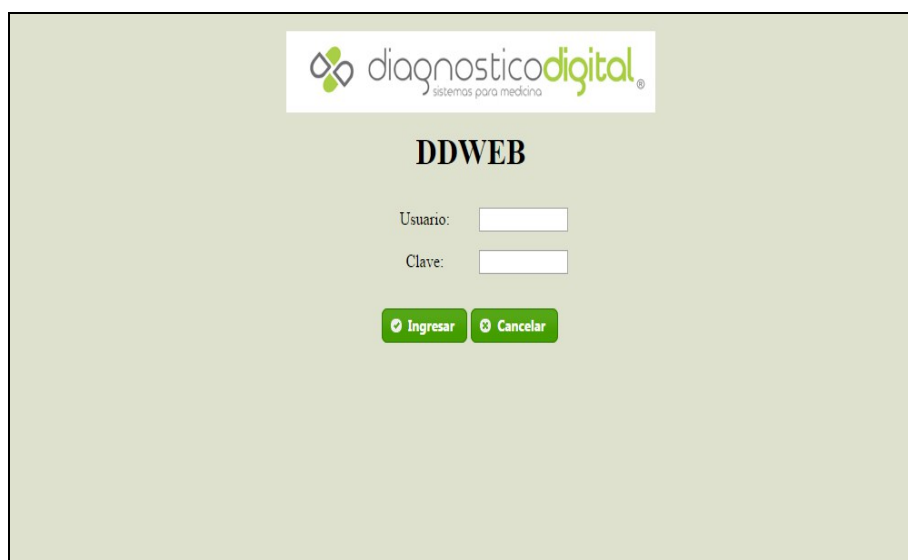

- * **Paso 2:** Es necesario que usted tenga un usuario y una clave que será dada por el administrador del sistema.

Pantalla de inicio

diagnostico digital
sistema para medicina

Administrador de estudios Diagnóstico Digital - DDWEB | admin [Admin, System] | [Cerrar sesión](#)

Mostrar 20 estudios por página Buscar: Desmarcar todo Columnas

ID PACIENTE	APELLIDO PACIENTE	EDAD	FECHA ESTUDIO	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	ESTADO	#IMG	A
Sin estudios para mostrar								

Sin estudios para mostrar Anterior Siguiente

Visualización simple Visualización avanzada Ver informe Editar informe

Archivos DICOMDIR Observaciones

Buscar estudios

Fechas:

- ☒ Cualquier día
- ☐ Hoy
- ☐ Ayer
- ☐ Última semana
- ☐ Último mes
- ☐ Entre:

Desde: Hasta:

Datos del paciente:

ID Paciente: Nombre: Número de estudio: Fecha nacimiento:

Modalidades:

- ☒ Todas
- ☐ NM
- ☐ PR
- ☐ CT
- ☐ PX
- ☐ XA
- ☐ SC
- ☐ US
- ☐ RF
- ☐ CR
- ☐ MR
- ☐ CT/PR
- ☐ DX
- ☐ OT

Buscar Limpiar Cancelar

Diagnóstico Digital - DDWEB | © 2014 Diagnóstico Digital | Todos los derechos reservados

Buscar Estudios debe realizar la búsqueda según el criterio deseado.

Buscar estudios

Fechas:

- ☒ Cualquier día
- ☐ Hoy
- ☐ Ayer
- ☐ Última semana
- ☐ Último mes
- ☐ Entre:

Desde: Hasta:

Datos del paciente:

ID Paciente: Nombre: Número de estudio: Fecha nacimiento:

Modalidades:

- ☒ Todas
- ☐ NM
- ☐ PR
- ☐ CT
- ☐ PX
- ☐ XA
- ☐ SC
- ☐ US
- ☐ RF
- ☐ CR
- ☐ MR
- ☐ CT/PR
- ☐ DX
- ☐ OT

Buscar Limpiar Cancelar

Filtro//Búsqueda:

- * Elegir el periodo de búsqueda en que se realizó el estudio, **Desde** la más reciente **Hasta** la más antigua.

Fechas:

☒ Cualquier día

☐ Hoy

☐ Ayer

☐ Última semana

☐ Último mes

☐ Entre:

Desde:

Hasta:

◀ Jan ▼ 2015 ▶

DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
					1	2
					3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

*

Podemos hacer más rápida nuestra búsqueda ingresando específicamente el **Nombre**, **ID del Paciente**, **Numero de estudio** y **Fecha de Nacimiento**.

Datos del paciente:

ID Paciente:

Nombre:

Número de estudio:

Fecha nacimiento:

Búsqueda por Aproximación: Ej. “Herrera Eloisa” y se ingresa “Her.”, el sistema mostrara todos los pacientes que cumplan ese criterio.

Buscar estudios

☐ Hoy

☐ Ayer

☐ Última semana

☐ Último mes

☐ Entre:

Desde:

Hasta:

Datos del paciente:

ID Paciente:

Nombre:

Número de estudio:

Fecha nacimiento:

Modalidades:

☒ Todos

☐ NM

☐ PR

☐ CT

☐ FX

☐ XA

☐ SC

☐ US

☐ RF

☐ CR

☐ MR

☐ CT/PR

☐ DX

☐ OT

Mostrar 100 estudios por página

Buscar: Desmarcar todo Columnas

ID PACIENTE	APELLIDO PACIENTE	EDAD	FECHA ESTUDIO	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	ESTADO	#IMG	A
01	SOMOZA HERRERA*ELOISA (64)***	?	03/11/2014 09:42	MR	COL. CERVICAL GG	Informado	40	
12090	HERRERA*ANALIA(47)***	?	08/10/2014 11:07	MR	RODILLA ENERO 014	A Informar	79	
11881	FERNANDEZ*HERNAN (37)***	?	29/09/2014 14:03	MR	HOMBRO ENERO 014	A Informar	81	
28 CEREBRO	HERRERA*ERNESTO (75)***	?	21/10/2014 12:10	MR	CEREBRO	A Informar	101	
49 HOMBRO DER	HERRERA *SARA (68)***	?	29/10/2014 09:33	MR	HOMBRO	A Informar	82	
12948	TECHERA*STELLA (39)***	?	18/11/2014 12:48	MR	C.L.S. OPCIONAL OCT 014	A Informar	49	
990	GONZALEZ ESTHER***	73	15/01/2015 20:20	XA	?	A Informar	3	
13760	HERRERA*CLAUDIO(39)***	?	18/12/2014 12:06	MR	RODILLA ENERO 014	A Informar	70	
13732	HERBAS*ANDRES 40***	?	16/12/2014 20:15	MR	RODILLA ENERO 014	A Informar	82	
817	ORTIZ MARIA ESTHER***	68	01/10/2014 10:41	XA	?	A Informar	7	
817	ORTIZ MARIA ESTHER***	68	01/10/2014 10:41	XA	?	A Informar	1	
975	ORTIZ MARIA ESTHER***	68	07/01/2015 22:20	XA	?	A Informar	11	
975	ORTIZ MARIA ESTHER***	68	07/01/2015 22:20	XA	?	A Informar	1	

Mostrando página 1 de 1

Anterior 1 Siguiente

- * Poder distinguir entre distintas modalidades:

Modalidades:

☒ Todas
 ☐ NM
 ☐ PR
☐ CT
 ☐ PX
 ☐ XA
☐ SC
 ☐ US
 ☐ RF
☐ CR
 ☐ MR
 ☐ CT/PR
☐ DX
 ☐ OT

* Una vez ingresado los datos solo tiene que presionar el botón “**Buscar**” y los resultados serán visibles en la tabla.

* Para borrar los datos ingresados, solo tiene que presionar el botón “**Limpiar**” y automáticamente se borrarán los datos ingresados.

Ejemplo de búsqueda:

Buscar estudios
☐ Hoy
☐ Ayer
☐ Última semana
☐ Último mes
☐ Entre:
 Desde:
 Hasta:
 Datos del paciente:
 ID Paciente:
 Nombre:
 Número de estudio:
 Fecha nacimiento:
 Modalidades:
☒ Todas
 ☐ NM
 ☐ PR
☐ CT
 ☐ PX
 ☐ XA
☐ SC
 ☐ US
 ☐ RF
☐ CR
 ☐ MR
 ☐ CT/PR
☐ DX
 ☐ OT

Mostrar estudios por página
 Buscar:


ID PACIENTE	APELLIDO PACIENTE	EDAD	FECHA ESTUDIO	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	ESTADO	#IMG	A
12420	RUIZ*GUSTAVO(44)***	?	24/10/2014 11:59	MR	RODILLA ENERO 014	Informado	79	
10 C.L.S.	RODRIGUEZ*JULIA 70 F***	?	16/10/2014 11:58	MR	C.L.S. G.G.	Informado	54	
12550	SOSA*WALTER (37)***	?	30/10/2014 11:42	MR	RODILLA ENERO 014	Informado	59	
06	APPEZZATO*MAURO (70)***	?	04/11/2014 11:49	MR	CLS PAI BOBINA BODY RIGIDA LARGE (GORDOS)	Informado	49	
12781	VALLEJOS*ABEL (44)***	?	11/11/2014 08:21	MR	C.L.S. OPCIONAL OCT 014	Informado	49	
09 C.L.S.	FAJFER*ANA 74 F***	?	16/10/2014 11:27	MR	CLS PAI	Informado	63	
179122 FC	HLOZEK*AIDA***	076Y	08/10/2014 11:32	CT	CUELLO	Informado	2844	
001735	LUNA GEORGE***	071Y	25/11/2014 16:41	CT	CEREBRO	Informado	20	
12940	ACEVAL*ESTELA (59)***	?	18/11/2014 08:28	MR	C.L.S. OPCIONAL OCT 014	Informado	49	
01	SOMOZA HERRERA*ELOISA (64)***	?	03/11/2014 09:42	MR	COL CERVICAL GG	Informado	40	
001662	NICOTERA MARCELO***	045Y	05/11/2014 14:50	CT	MCF	Informado	52	
12086	FERNANDEZ*JUAN(54)***	?	08/10/2014 09:26	MR	C.L.S. OCTUBRE 014	Informado	46	
12072	AMARILLA*JOSE LUIS (43)***	?	07/10/2014 12:16	MR	RODILLA ENERO 014	Informado	69	
14112	PEREZ*GUSTAVO 39***	?	09/01/2015 22:11	MR	HOMBRO ENERO 014	Informado	82	

* En esta tabla se visualiza el resultado de la búsqueda, muestra información de pacientes con sus correspondientes estudios.

* Seleccionar la cantidad de estudios que deseamos ver por página.

Mostrar estudios por página
 Buscar:

* La casilla de “**columnas**” nos permite seleccionar como deseamos que aparezcan los informes.

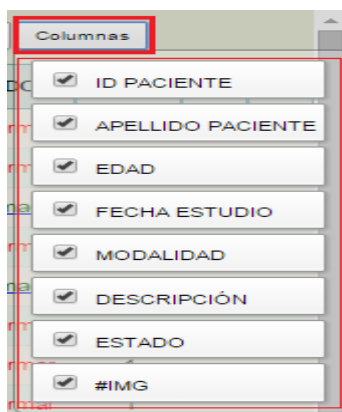

Ejemplo: Si seleccionamos, **ID Paciente, Edad, Fecha de estudio, Modalidad y Estado.**



Se vera de la siguiente forma:

ID PACIENTE	EDAD	FECHA ESTUDIO	MODALIDAD	ESTADO	A	N
Unknown	?	01/08/2013 13:03	CT	A Informar		
TOBILLO	?	26/03/2012 19:32	MR	A Informar		
TC3391012	?	23/10/2012 09:58	CT	Informado		
TC20131129_042404	1	29/11/2013 04:24	CT	A Informar		
T 037	?	03/11/2011 11:30	CT	Informado		
ROD.DER.	115	29/01/2013 16:47	OT	A Informar		
NEV 76484	?	06/01/2012 14:06	US	A Informar		
NEC 76485	?	06/01/2012 14:23	US	A Informar		
HOMBRO IZO.	76	27/03/2012 13:27	MR	A Informar		
93354292	?	06/06/2014 09:07	CT	A Informar		
77914-FQ	?	17/04/2012 11:05	CR	A Informar		
77.919 RS	?	17/04/2012 16:10	CR	A Informar		
738365	?	27/03/2012 08:22	MR	A Informar		
738184	?	26/03/2012 17:19	MR	A Informar		
6464343	?	30/09/2012 22:08	CR	A Informar		

* Podemos desmarcar todo lo seleccionado presionando el botón **“Desmarcar Todo”**

Buscar:

* Tenemos la opción de ordenar ascendente y descendente.

ID PACIENTE	APELLIDO PACIENTE	EDAD	FECHA ESTUDIO	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN	ESTADO	#IMG	A	N
-------------	-------------------	------	---------------	-----------	-------------	--------	------	---	---


* **#IMG**: informa cuanta cantidad de imágenes contiene el estudio.

* **A**: informa si el estudio tiene archivos adjuntos existentes.

* **N**: informa si hay notas.


* Muestra el ID del paciente, Apellido del paciente, Edad, Fecha, Día y Horario en la que se realizo el estudio, Modalidad, Descripción del estudio, Estado, Cantidad de Imágenes que contiene el estudio, Archivos adjuntos y Notas.

- Cada estudio esta asociado a un informe, hay 3 estados de informes distintos:

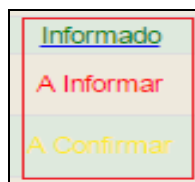


- “**A informar**” se verá en color Rojo - No esta aún informado.
- “**A confirmar**” en color Amarillo - El estudio queda pendiente de revisión.
- “**Informado**” en color Verde - El estudio ya se encuentra cerrado y no se podrá modificar.

Botones de Acciones:

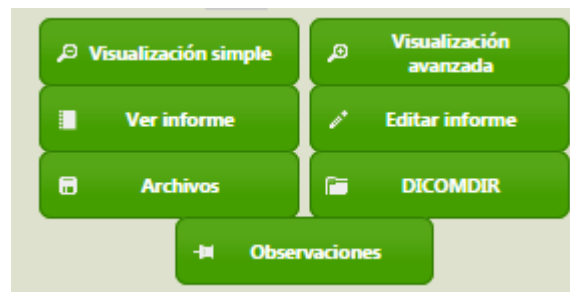


- * **Visualización Simple:** Nos permite ver las imágenes que contiene el informe a través de un visualizador (**Oviyam**), las imágenes en formato WADO.

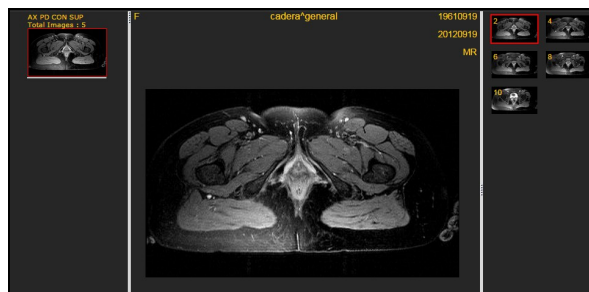


- En la parte superior se podrá presionar la solapa “**Show Tools**” donde se desplegarán las herramientas de visualización como se observa en la siguiente figura.

Show Tools

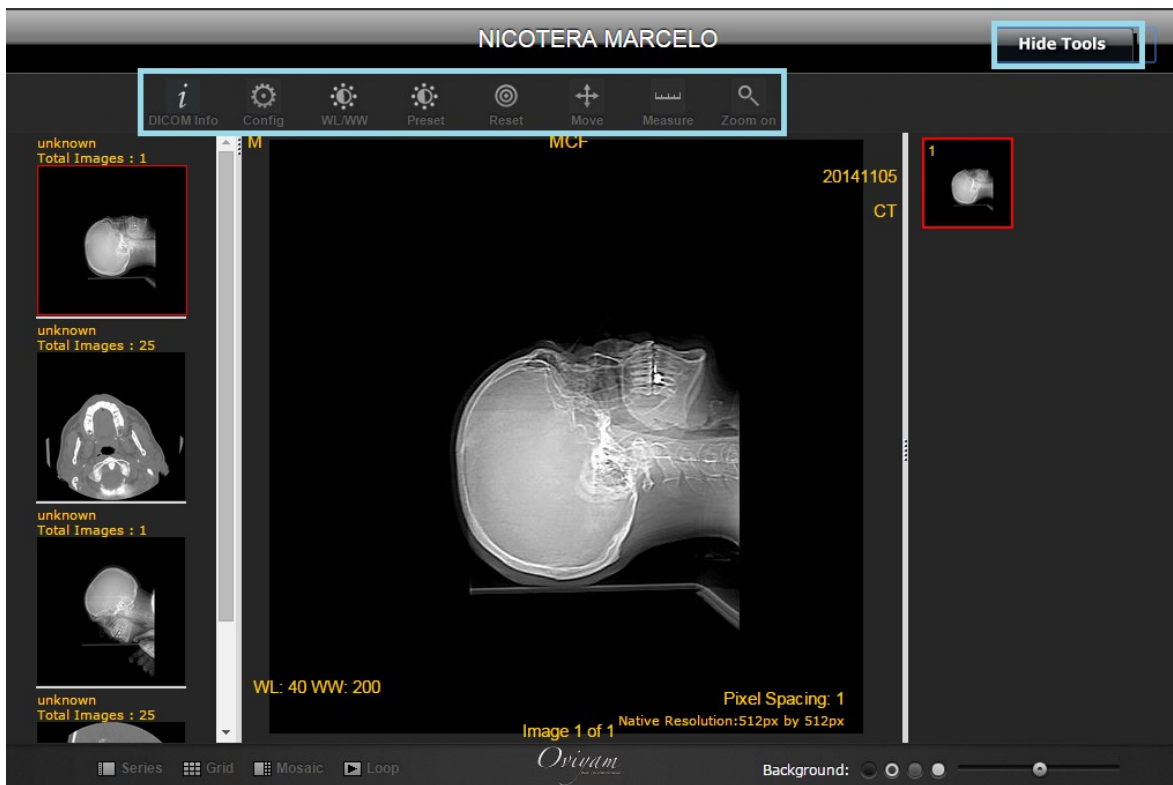


- * **Visualización Avanzada:** Nos permite descargar un programa (visualizador) con mayores herramientas respecto a la visualización básicas y las imágenes en dicom nativo.
- * **Ver Informe:** Nos permite descargar el informe.

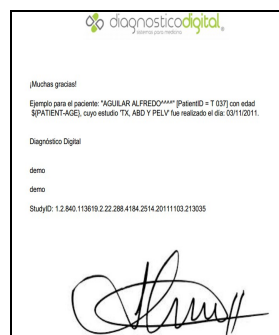


* **Editar Informe:** Nos permite editar el informe. Con protocolos prediseñados.



- Luego de elegir el protocolo adecuado podrá editar el informe.
- “**Guardar cambios**” permite posteriormente realizar correcciones.
- “**Cerrar informe**” finaliza el informe.

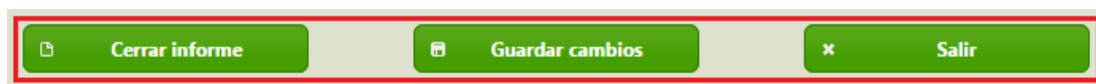

* **Archivos:** Nos permite subir archivos.

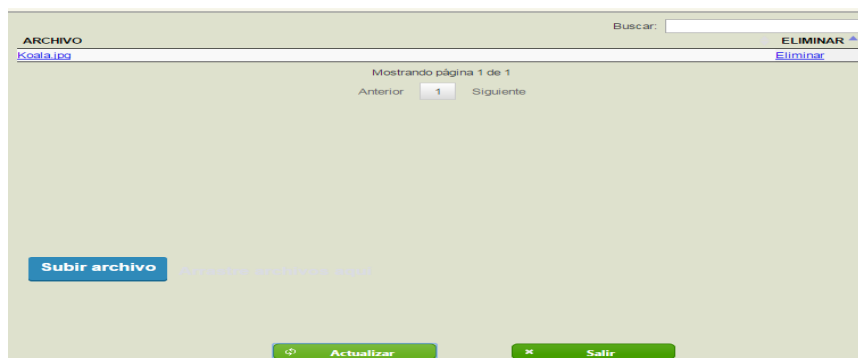

- Para subir un archivos debemos presionar en el botón “**Subir Archivo**”.

A rectangular button with a blue background and a red border. The text "Subir archivo" is written in white, bold, sans-serif font.

-Se encuentra un filtro para agilizar la búsqueda.

A search input field with a light gray background and a thin black border. The word "Buscar:" is written in a small, dark font on the left side of the field.

- La opción de eliminarlo, presionando el botón “**Eliminar**”.

A rectangular button with a white background and a red border. The word "ELIMINAR" is written in black, bold, sans-serif font.

* **Dicomdir**: Nos permite descargar las imágenes en nuestro ordenador en formato dicom y observarlas en otro visualizador.

* **Observaciones**: Nos permite poder observar y editar las observaciones.